


2-2. Łącznik

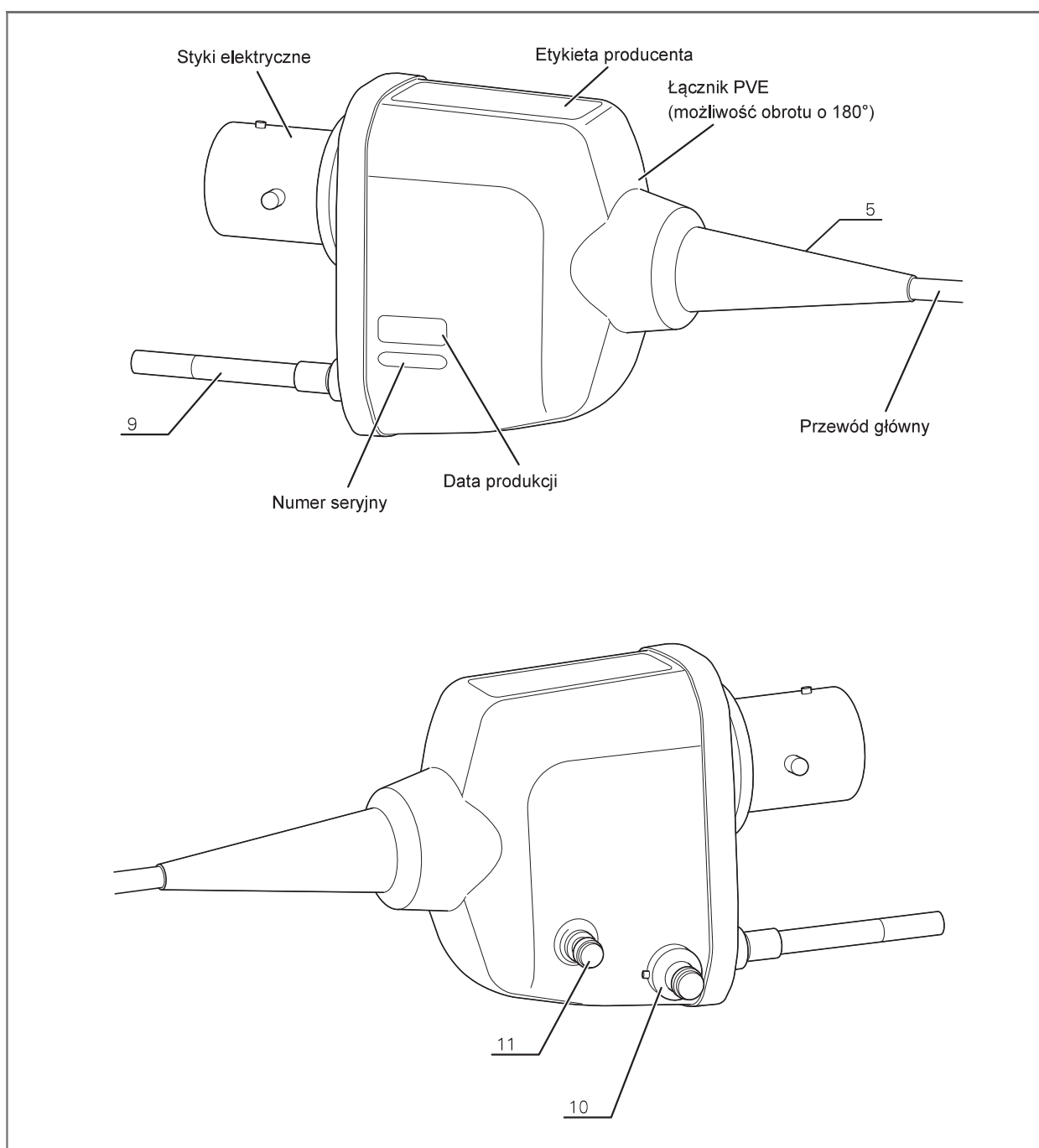

Ryc. 2.3

- 9 Wtyczka światłowodu
Wtyczka światłowodu przewodzi światło ze źródła światła do dystalnego końca endoskopu.
- 10 Łącznik odpowietrznika
W tym miejscu należy podłączyć nasadkę wentylacyjną lub łącznik endoskopu w testerze szczelności.
- 11 Przyłącze sprzężenia zwrotnego
W przypadku używania urządzenia elektrochirurgicznego należy podłączyć tu endoskopowy przewód sprzężenia zwrotnego (przewód S) lub uziemiony kabel kondensatora (OL-Z4).