


# SOLUSCOPE PA

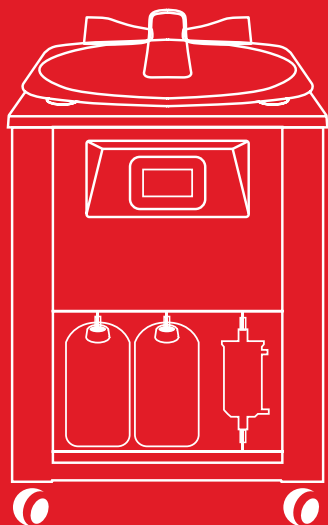

FORMUŁA NA BAZIE  
KWASU NADOCTOWEGO

SZEROKIE SPEKTRUM  
DZIAŁANIA JUŻ OD  
6 MINUT

ZGODNOŚĆ Z NORMĄ  
EN ISO 15883-4

KOMPATYBILNOŚĆ  
Z WIĘKSZOŚCIĄ  
ENDOSKOPÓW  
GIĘTKICH DOSTĘPNYCH  
NA RYNKU

## PREPARAT DO DEZYNFEKCJI ENDOSKOPÓW

### PRZEZNACZENIE

- Dezynfekcja endoskopów w myjni-dezynfektorze *Soluscope Serie 1*.
- *Soluscope PA* stosuje się w połączeniu z preparatem myjącym *Soluscope EZ*.

### SKŁAD

- Kwas nadoctowy (5%)
- Nadtlenek wodoru
- Kwas octowy

### CHARAKTERYSTYKA

- Przezroczysty, bezbarwny roztwór
- Gęstość w temp. 20°C: od 1,10 do 1,13
- Wartość pH (koncentrat 10% roztwór wodny): od 1,0 do 4,2
- Okres trwałości: 14 miesięcy (zamknięty), 2 miesiące (po otwarciu)

### INSTRUKCJA UŻYCIA

- Wstawić kanister do urządzenia.
- Wkręć białą nakrętkę połączoną z *Soluscope Serie 1* do kanistra.
- Należy upewnić się, czy otwór odpowietrzający nie jest zablokowany.
- Skoncentrowany roztwór do użytku profesjonalnego.



### SKUTECZNOŚĆ MIKROBÓJCZA

| PREPARAT O DZIAŁANIU    | NORMY              | CZAS DZIAŁANIA       |
|-------------------------|--------------------|----------------------|
| Bakteriobójczym         | EN 13727, EN 14561 | 6 minut w temp. 40°C |
| Prątkobójczym           | EN 14348, EN 14563 | 6 minut w temp. 40°C |
| Drożdżako/grzybobójczym | EN 13624, EN 14562 | 6 minut w temp. 40°C |
| Wirusobójczym           | EN 14476           | 6 minut w temp. 40°C |
| Sporobójczym            | EN 14347           | 6 minut w temp. 40°C |

### ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

- Uwaga: należy przestrzegać środków ostrożności dotyczących stosowania (określonych w przepisach europejskich 1272/2008).
- Przechowywać w temperaturze od 5°C do 25°C.
- Wyrób medyczny klasy IIb (wg zmienionej dyrektywy 93/42/EWG).

### OPAKOWANIE

- 4 kanistry o pojemności 5 litrów



**ECOLAB®**

**Soluscope**

ECOLAB SP. Z O.O.  
ul. Opolska 114, 31-323 Kraków  
[pl-pl.ecolab.com/endoskopia](http://pl-pl.ecolab.com/endoskopia)

SOLUSCOPE SAS  
100, rue du Fauge - Z.I. Les Paluds  
13400 Aubagne - France  
☎ +33 (0)4 91 83 21 22 ☎ +33 (0)4 91 83 21 10  
✉ [info@soluscope.com](mailto:info@soluscope.com)

CE  
1434