

Plomby plastikowe

Zabezpieczenia do kontenerów

Opis produktu

Plomby plastikowe stosowane są w celu odpowiedniego zabezpieczenia zamknięcia kontenerów przed naruszeniem lub niekontrolowanym otwarciem. Służą zagwarantowaniu prawidłowego zamknięcia od procesu sterylizacji, aż do momentu użycia narzędzi na bloku operacyjnym.

Plomby wyprodukowane zostały z polipropylenu nadającego się do recyklingu. Materiał, z którego są wykonane, jest odporny na proces sterylizacji parowej, a temperatura zmiękczenia surowca wynosi

powyżej 150°C. Plastikowe plomby spełniają wymagania opisane w normie EN 868-8 sekcja 4.2.3. Każde opakowanie opatrzone jest odpowiednią etykietą ze wszystkimi niezbędnymi danymi w procesie dokumentacji.

Plomby występują w dwóch długościach- standardowe (19mm) oraz długie (30mm), w dwóch kolorach- niebieskim i czerwonym, każdy kolor i rozmiar w opcji ze wskaźnikiem lub bez wskaźnika.



Wskaźnik sterylizacji parowej na plombach ze wskaźnikiem przebarwia się z koloru różowego na czarny.


Sposób użycia

Przed użyciem zawartości kontenera należy sprawdzić czy plastikowa plomba jest nienaruszona; w przeciwnym wypadku należy oddać kontener do ponownej sterylizacji.

Obszar zastosowań

Kontenery różnego typu (Aeskulap, Aygun, Wagner)

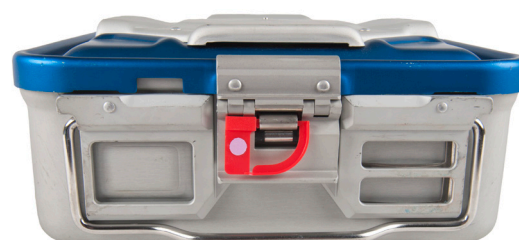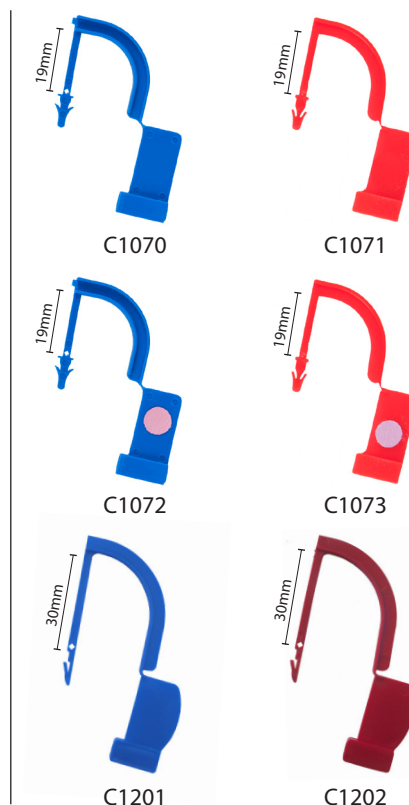

normy	przechowywanie i okres przydatności	numer katalogowy i opakowanie
EN 868-8 sekcja 4.2.3 EN 980 EN 285 Rozporządzenie 2017/745 (MDR)	Przechowywać w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła. Okres przydatności: 5 lat od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.	plomby 19mm (1000 szt./op.) ■ C1070 ■ C1071 plomby ze wskaźnikiem (1000 szt./op.) ■ C1072 ■ C1073 plomby długie 30mm (1000 szt./op.) ■ C1201 ■ C1202 długie ze wskaźnikiem (1000 szt./op.) ■ C1203 ■ C1204 długie ze wskaźnikiem (50 szt./op.) ■ C1203-50 ■ C1204-50
	INFORMER MED sp. z o.o. ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, Polska tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19 e-mail: biuro@informermed.eu www.informermed.eu	