


## PROTEZKA DO WSZCZEPÓW WEWNATRZUSZNYCH (PROTEZKA STRZEMIĄCZKA) – typ I

### Przeznaczenie

Protezki są przeznaczone do chirurgicznego leczenia otosklerozy.

Wymiary w milimetrach

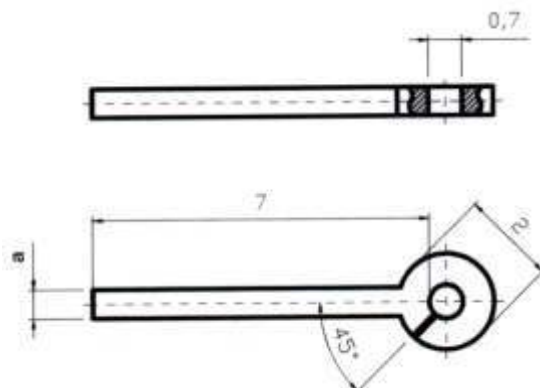

### Charakterystyka

Protezki są wykonana w całości z politetrafluoroetylen (PTFE). Składają się z tłoczka i pierścienia leżącego w płaszczyźnie osi wzdłużnej tłoczka, nacię tego pod kątem 45° w stosunku do osi wzdłużnej. Wymiary pierścienia są stałe, natomiast średnica tłoczka może się zmieniać.

Protezki pakuje się po jednej sztuce bezpośrednio do sztywnych pudełek z polipropylenu, które następnie umieszcza się w torebkach papierowo-foliowych.

Protezki są sterylizowane tlenkiem etylenu i są dostarczane w stanie jałowym.

Numery katalogowe	101-03	101-04	101-05
Średnica tłoczka „a” (mm)	0,50	0,55	0,60

### Sposób stosowania

Po odcięciu brzegu torebki pudełko z protezką wyjąć na stolik z narzędziami lub na jałową serwetę. Wyjąć protezkę i przygotować do założenia na wyrostek długi kowadełko. W tym celu zmierzyć odległość między niszą okienka a wyrostkiem długim kowadełka i przyciąć tłoczek protezki do wymaganej długości. Następnie rozszerzyć pierścień protezki za pomocą stożkowego instrumentu mikrochirurgicznego. Po rozszerzeniu pierścienia przyjmuje kształt litery C, a jego rozwarście umożliwia wsunięcie protezki na wyrostek kowadełka. Można tego dokonać mikrokleszczycami, chwytając pierścienia jak pokazano na rysunku i zwracając uwagę, aby ramiona kleszczyków nie znajdowały się w otworze pierścienia. Uchwycenie protezki najlepiej wykonać pod mikroskopem, przy małym powiększeniu. Po założeniu protezki na wyrostek długi kowadełka pierścień należy lekko docisnąć mikrokleszczycami na całym obwodzie wyrostka.

